

Veroval®



Veroval®



V tomto krátkom videonávode vám vysvetlíme, ako jednoducho prenesiete údaje z vášho Veroval® EKG a tlakomera...

Veroval®



... do vášho Veroval® Medi.connect softvéru.

Veroval®

Veroval medi.connect

Juraj Kováč

HARTMANN

Prehľad Krvný tlak EKG Hmotnosť Teplota Domáci test Aktivita Nastavenia

Posledné meranie Posledný týždeň Minulý mesiac

Krvný tlak

Systola Diastola

Tepová frekvencia

Hmotnosť

kg

BMI

Teplota

ráno na obed večer

Domáci test

Test	Dátum	Výsledok	nasledujúci test
Cholesterol	-	-	-
Črevo	-	-	-
Žalúdok	-	-	-

Aktivita

Kroky

kcal

EKG

OK SLOW FAST ERROR


PAUSE RHYTHM WAVE

Zobrazíť podrobné vyhodnotenia

OneNote 2016

Otvorte si Veroval® Medi.connect na vašom počítači,...

Veroval®

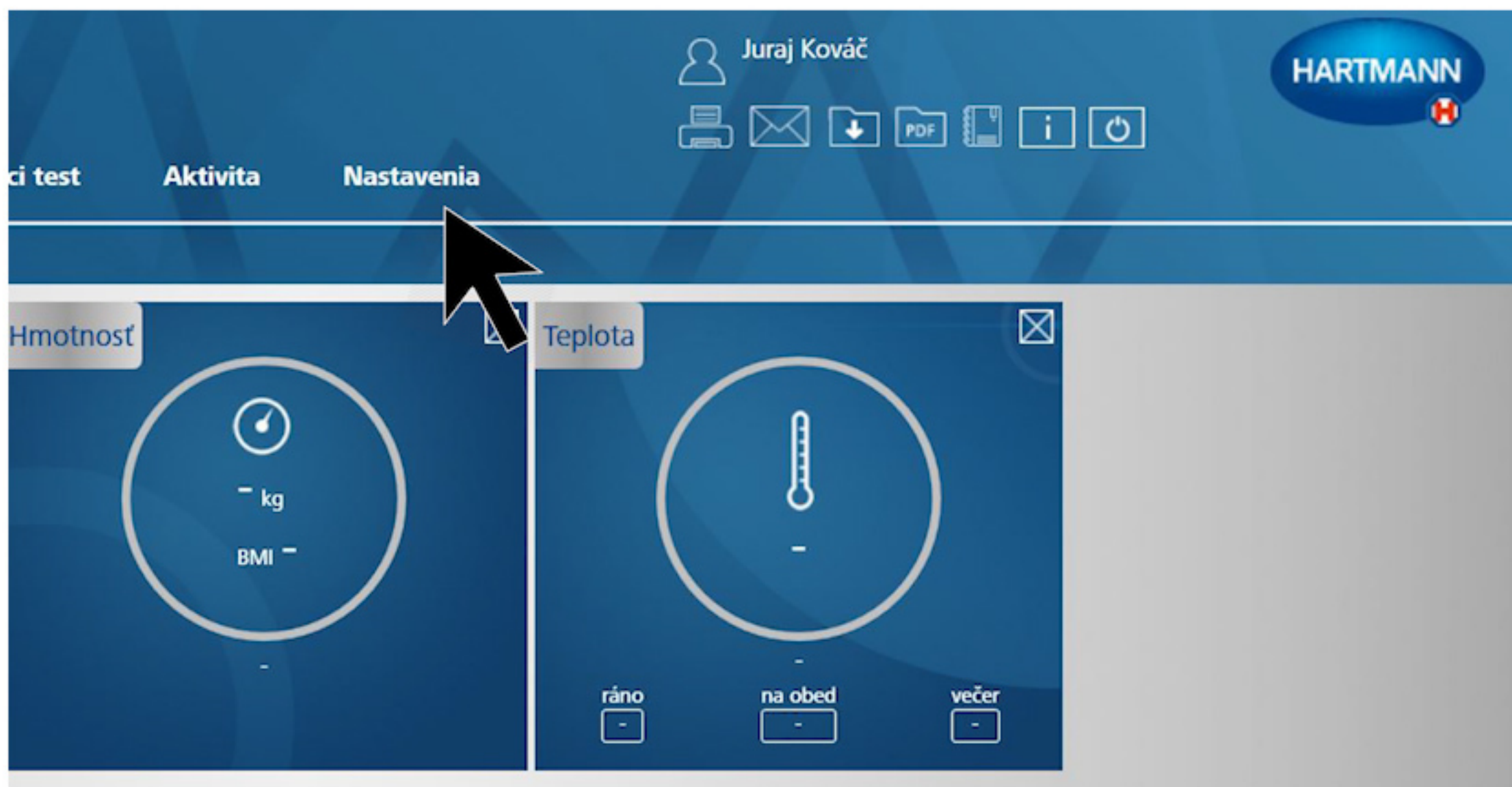

... prejdite v hornej časti na „Nastavenia“.


The screenshot displays the Veroval user interface. At the top left, the logo 'medi.connect' is visible. The user's name 'Juraj Kováč' is shown in the top right corner, along with the 'HARTMANN' logo. A navigation bar contains several menu items: 'Krvný tlak', 'EKG', 'Hmotnosť', 'Teplota', 'Domáci test', 'Aktivita', and 'Nastavenia'. Below this, a secondary navigation bar includes 'Systém', 'Krvný tlak', 'EKG', 'Hmotnosť', 'Aktivita', 'Teplota', and 'Prípomienka'. The 'EKG' option in the secondary bar is highlighted with a black mouse cursor. The main content area shows a user profile form with the following fields: Gender (radio buttons for 'Muž' and 'Žena'), Name (first name 'Juraj', last name 'Kováč'), Address (street 'Štefánikova 1', postal code '81106', city 'Bratislava'), Date of birth (16.02.1977), Age (40 years), and Height (175 Centimetre). A note at the bottom left states 'Ochrana heslom nie je nastavená' with a lock icon.

Následne kliknite v riadku vľavo nižšie na možnosť „EKG“.


The screenshot displays the Veroval® medi.connect web interface. At the top left, the logo 'Veroval® medi.connect' is visible. The user's name 'Juraj Kováč' is shown in the top right corner, along with the HARTMANN logo. A navigation menu includes 'Prehľad', 'Krvný tlak', 'EKG', 'Hmotnosť', 'Teplota', 'Domáci test', 'Aktivita', and 'Nastavenia'. Below this, a secondary menu shows 'Môj profil', 'Systém', 'Krvný tlak', 'EKG', 'Hmotnosť', 'Aktivita', 'Teplota', and 'Prípomienka'. The main content area is titled 'EKG' and features a dropdown menu 'Vyber prístroja' with a search icon. A search result 'Veroval EKG a tlakomer' is displayed with a checkbox and a device icon. Below the search results are two buttons: 'Uložiť' and 'Obnoviť'.

Na stránke nastavenia EKG zvolte možnosť Veroval® EKG a tlakomer,...


Veroval®

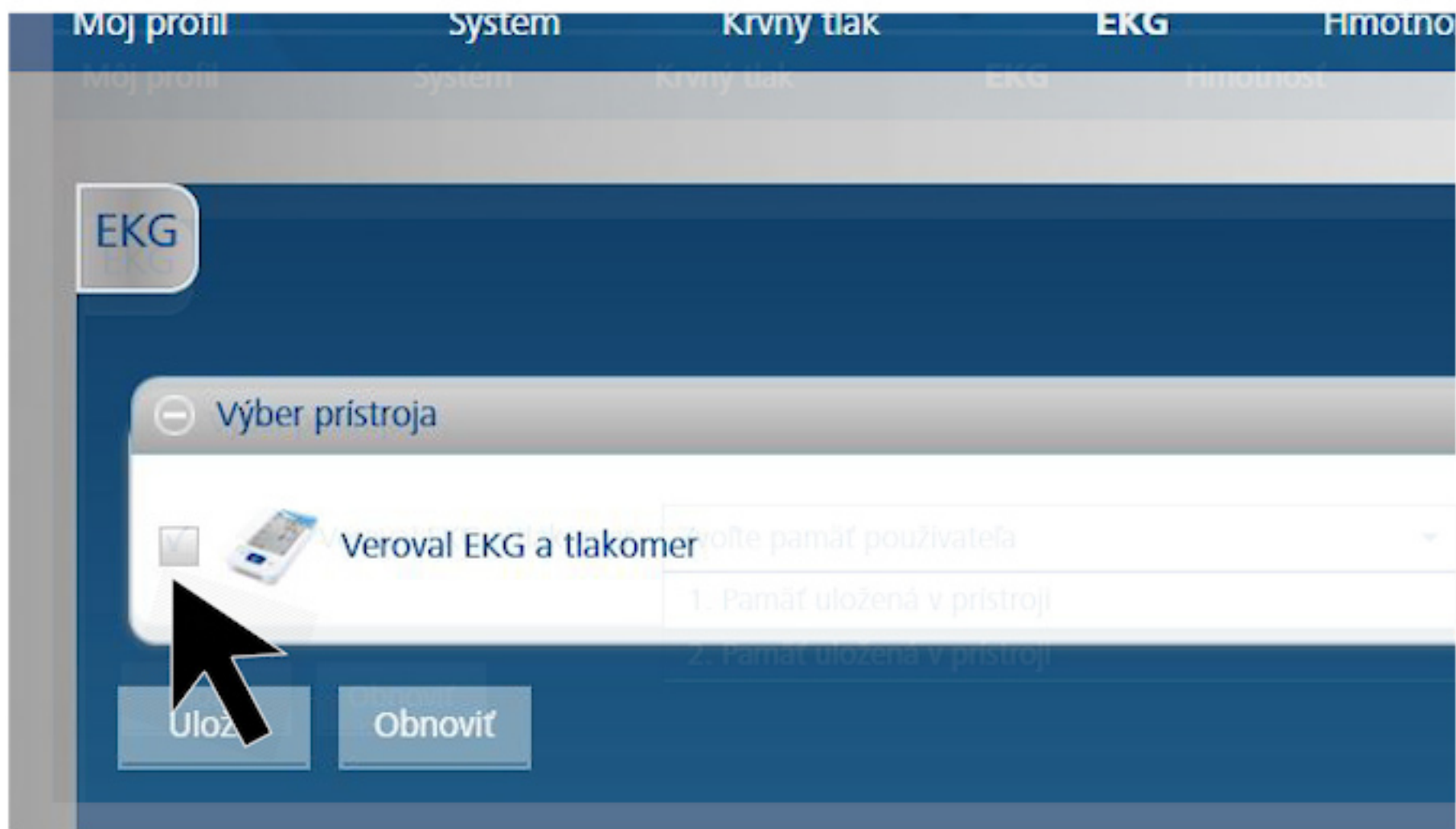

Na stránke nastavenia EKG zvolte možnosť Veroval® EKG a tlakomer,...

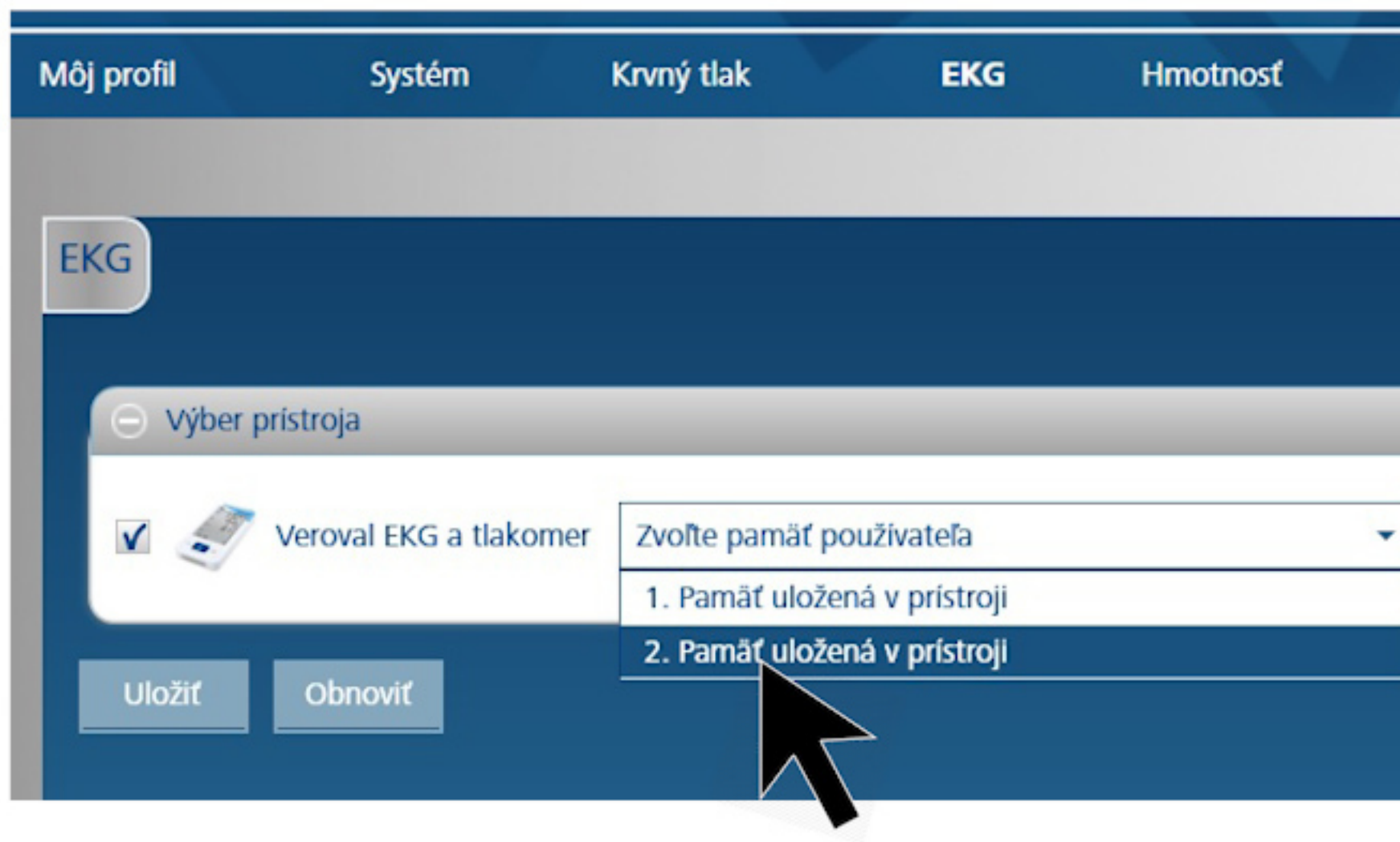


... zvolte uživatele a uložte. Tento krok stačí vykonat iba raz.

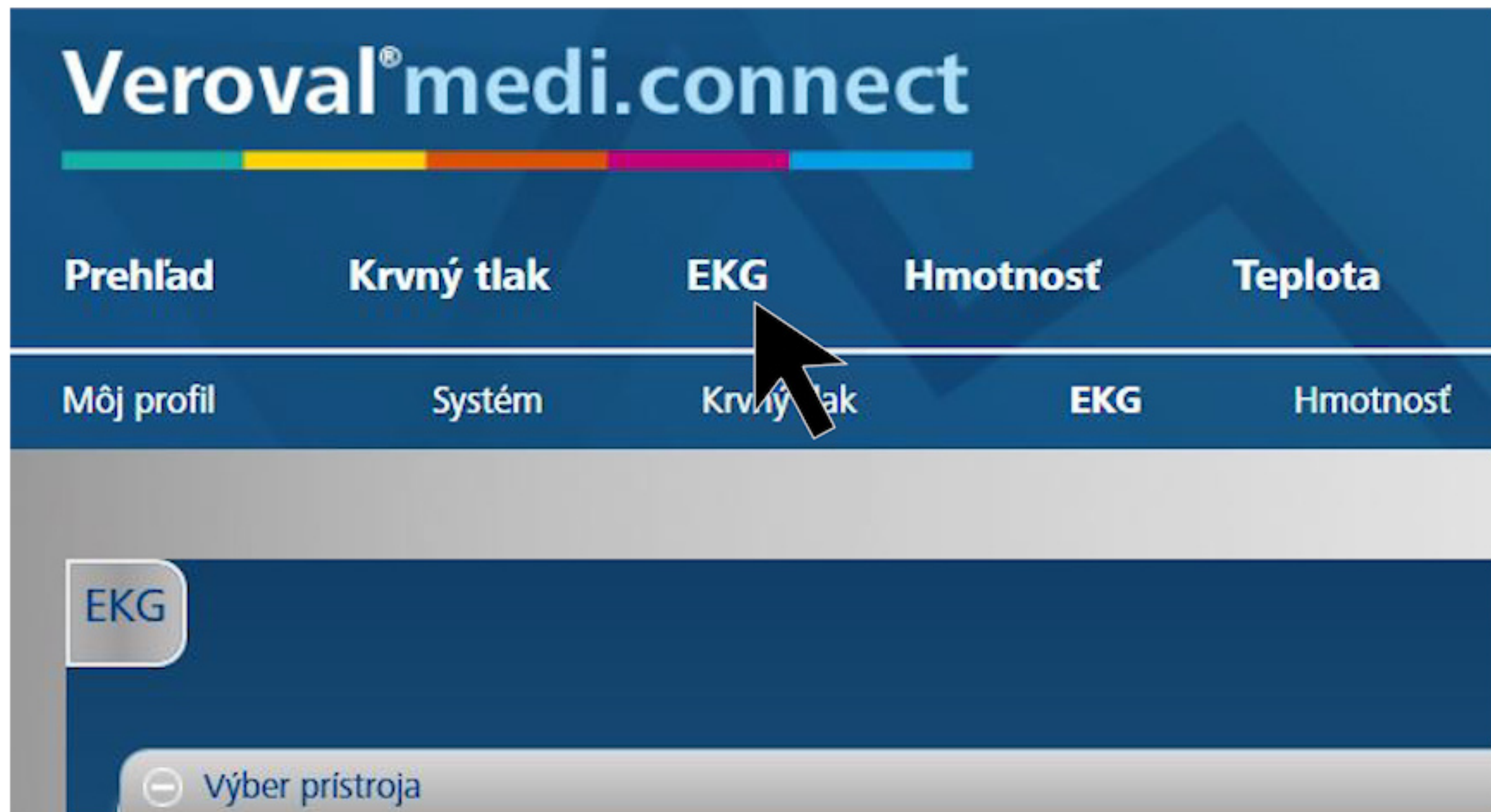

Na prenesenie údajov kliknite na „EKG“ v hornej časti registra,...

Veroval®

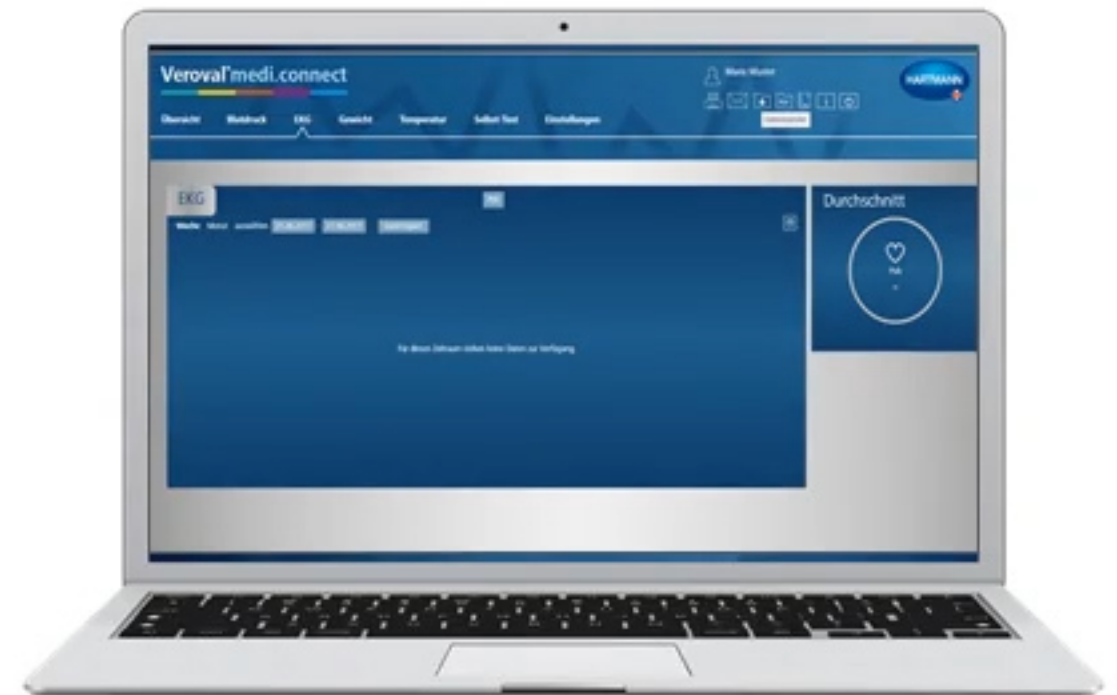

... zasuníte USB-Bluetooth adaptér
do USB otvoru na vašom počítači.

Veroval[®]



Pri správnom prepojení svieti adaptér na zeleno.

Veroval®



Zapnite váš prístroj vpravo dole.

Veroval®



Ak nezačne prenos údajov do 30 sekúnd,...

Veroval®




... prepne sa prístroj do pohotovostného režimu.

Veroval®




V takomto prípade zapnite prístroj znovu.

Veroval®

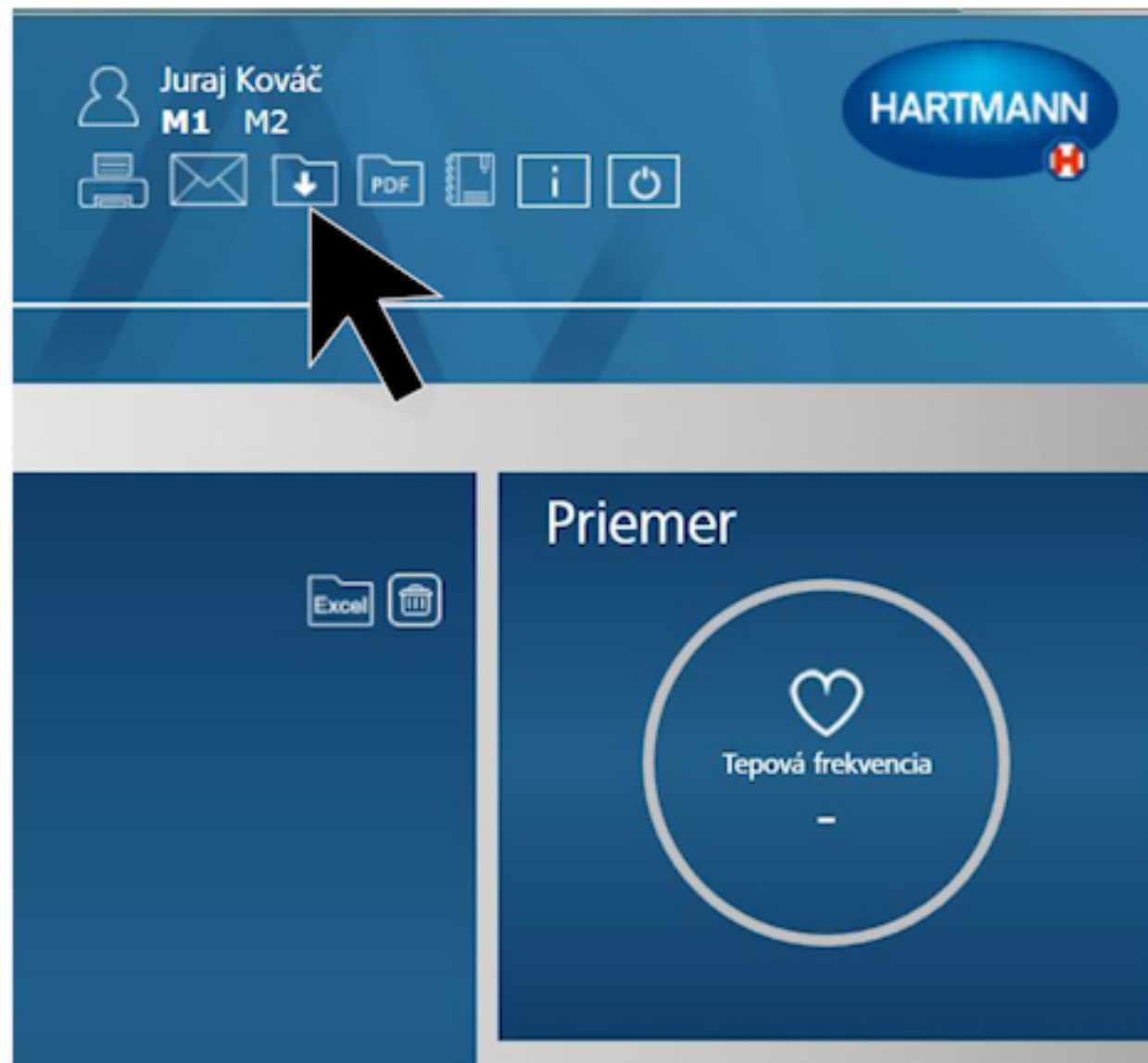

Kliknite vpravo hore na tlačidlo „Prenos údajov“.

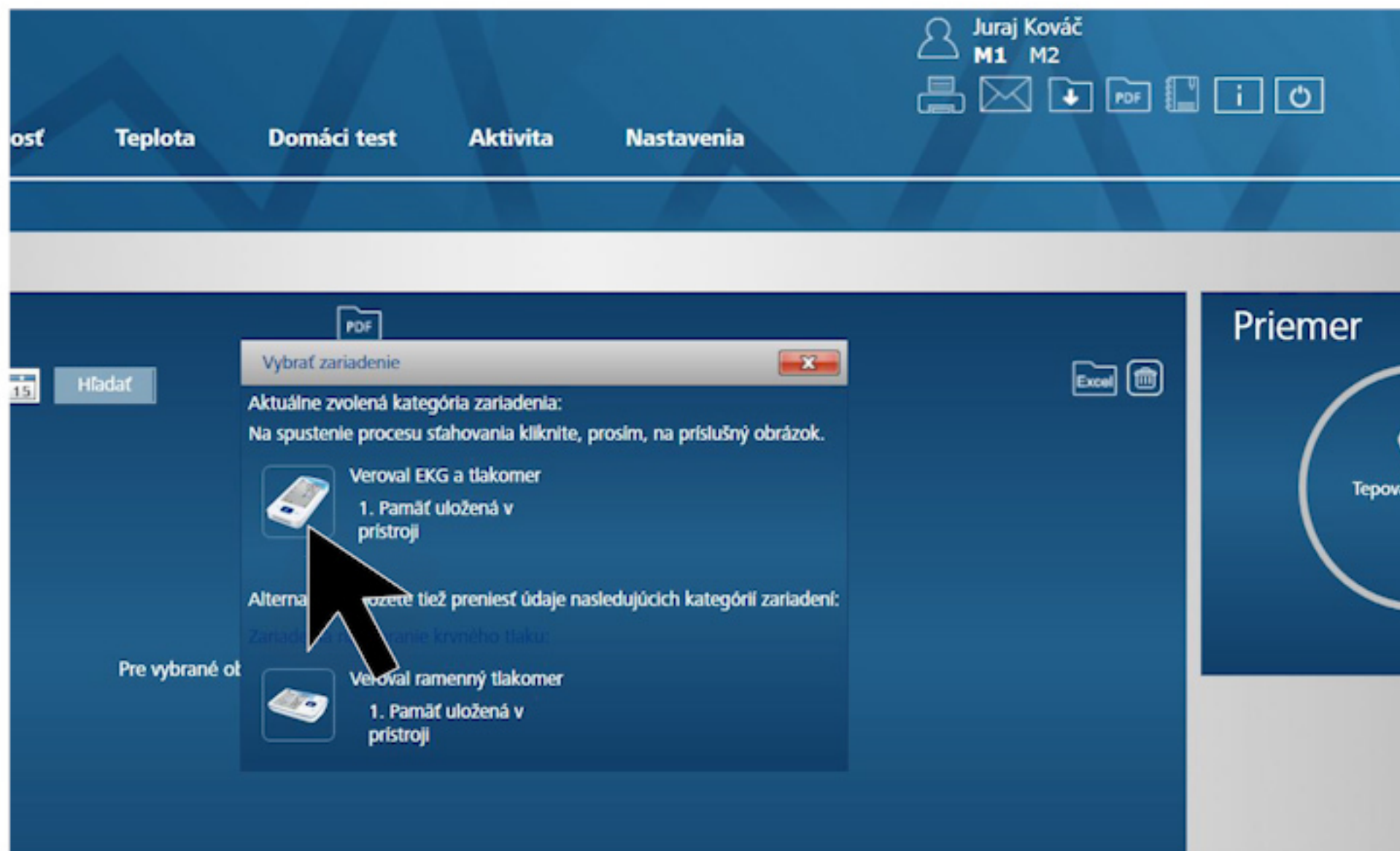

Vyberte váš prístroj Veroval® EKG a tlakomer.


The screenshot displays the Veroval®medi.connect web application interface. At the top left, the logo "Veroval®medi.connect" is visible. The top right corner shows the user profile "Juraj Kováč" with identifiers "M1" and "M2", and the "HARTMANN" logo. A navigation bar includes tabs for "Prehľad", "Krvný tlak", "EKG", "Hmotnosť", "Teplota", and "Domá". The "EKG" tab is active. Below the navigation bar, there are search filters for "Týždeň" (Week) and "Mesiac vybrať" (Select month) with date pickers for "07.09.2017" and "13.09.2017", and a "Hľadať" (Search) button. A central modal window titled "Info" is open, displaying a search progress message: "Prebieha načítanie dát. Počkajte chvíľu, prosím." (Data loading is in progress. Please wait a moment, please.) Below the modal, there are "Skenuvanie" (Scan) and "Zrušiť" (Cancel) buttons. On the right side, a "Priemer" (Average) section shows a heart icon and the text "Tepová frekvencia" (Heart rate) with a dash below it. The bottom right corner features "Excel" and "Print" icons.

Prístroj sa vyhľadáva a pri úspešnom vyhľadaní sa zobrazí.

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web application interface. At the top left, the logo 'Veroval® medi.connect' is visible. The top right corner shows the user profile 'Juraj Kováč' with 'M1 M2' and the 'HARTMANN' logo. A navigation bar includes 'Prehľad', 'Krvný tlak', 'EKG', 'Hmotnosť', 'Teplota', and 'Domov'. The 'EKG' tab is active. Below the navigation bar, there are search filters for 'Týždeň' (Week) and 'Mesiac vybrať' (Select month) with date ranges '07.09.2017' and '13.09.2017', and a 'Hľadať' (Search) button. A modal window titled 'Info' is open, displaying a search result for 'Veroval ECG' with a checkmark and a refresh icon. The modal also lists 'Zoznam nájdených zariadení s ikonou a názvom', 'Zoznam spárovaných zariadení', and 'Zoznam nespárovaných zariadení'. At the bottom of the modal are 'Skenovanie' (Scanning) and 'Zrušiť' (Cancel) buttons. On the right side of the main interface, there is a 'Priemer' (Average) section with a heart icon and the text 'Tepová frekvencia' (Heart rate) and a dash '-'. Below this is an 'Excel' button and a folder icon.

Prístroj sa vyhľadáva a pri úspešnom vyhľadaní sa zobrazí.

Veroval®

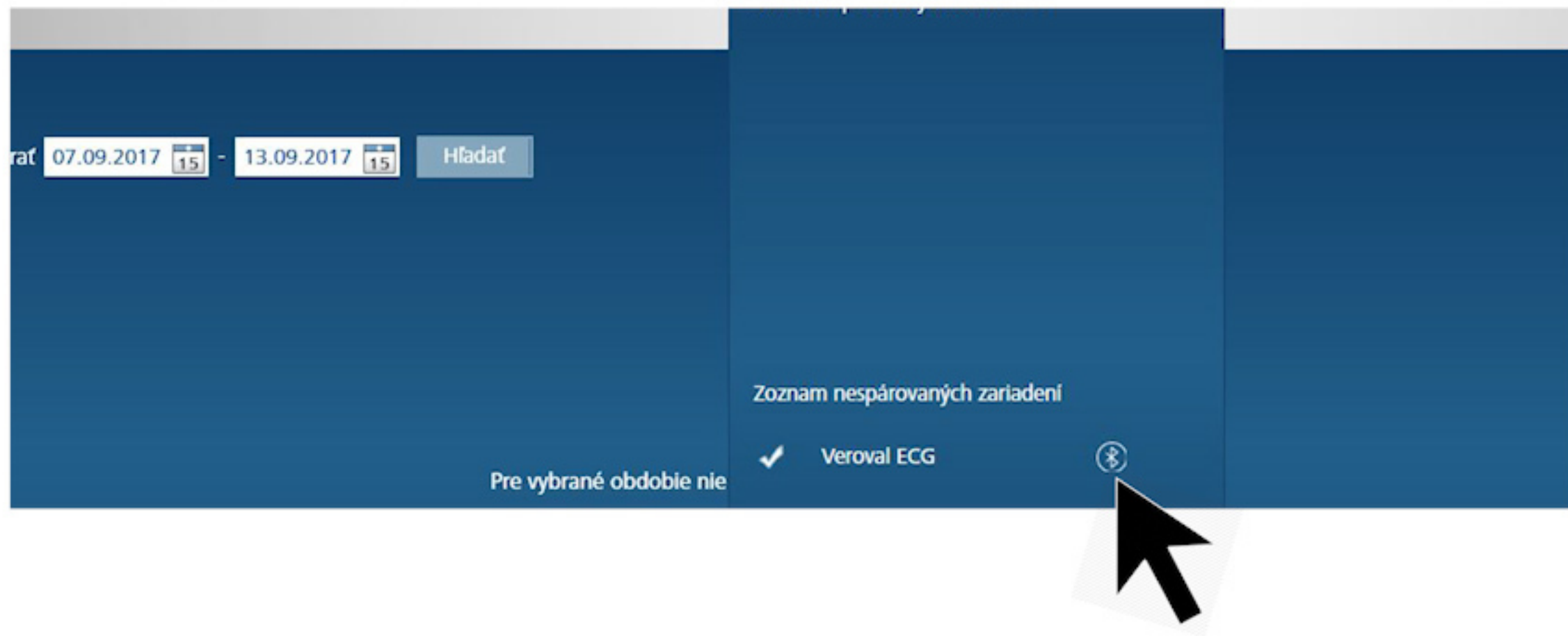

Teraz kliknite na symbol Bluetooth...

Veroval®



... a znovu zapnite EKG prístroj,...

Veroval®



... ak sa prístroj už uviedol do pohotovostného režimu.

Veroval®



Bluetooth pripojenie je vytvorené.

Veroval®

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web application interface. At the top, the user is identified as Juraj Kováč. The main navigation bar includes sections for 'Prehľad', 'Krvný tlak', 'EKG', 'Hmotnosť', and 'Teplota'. The 'Môj profil' (My Profile) section is active, showing personal details such as name (Juraj Kováč), date of birth (16.02.1977), and age (40). A modal window titled 'Info' is open, showing a list of devices. The 'Zoznam spárovaných zariadení' (List of paired devices) section contains one entry: 'Veroval ECG', which has a checkmark and a new device icon. A mouse cursor is pointing at this icon. Below the modal, there are buttons for 'Skenovanie' (Scanning) and 'Zrušiť' (Cancel).

Kliknite na novú ikonku na prenos údajov.

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web application interface. At the top left, the logo "Veroval® medi.connect" is visible. The top right corner shows the user profile "Juraj Kováč" with identifiers "M1" and "M2", and the "HARTMANN" logo. A navigation menu includes "Prehľad", "Krvný tlak", "EKG", "Hmotnosť", "Teplota", and "Domá". The "EKG" tab is active, showing a date range selector for "Týždeň" (07.09.2017 to 13.09.2017) and a "Hľadať" button. A central modal window titled "Info" is open, displaying a list of devices: "Zoznam nájdených zariadení s ikonou a názvom" and "Zoznam spárovaných zariadení". Below this, a checkmark indicates "Veroval ECG" is selected. A large white box in the center of the modal contains a loading spinner and the text "Prebieha načítanie dát. Počkajte chvíľu, prosím." At the bottom of the modal are "Skenuvanie" and "Zrušiť" buttons. On the right side of the main interface, a "Priemer" (Average) section shows a heart icon and "Tepová frekvencia" (Heart rate) with a dash "-" below it. The background of the EKG section shows the text "Pre vybrané obdobie nie" (For the selected period none).

Údaje sa teraz prenášajú.

Veroval[®]



Počas prenosu svieti adaptér na červeno...

Veroval®



... a na EKG prístroji bliká symbol pripojenia.

The screenshot displays the Veroval®medi.connect web interface. At the top, the user is identified as Juraj Kováč, M1, M2. The navigation menu includes: Prehľad, Krvný tlak, EKG, Hmotnosť, Teplota, Domáci test, Aktivita, and Nastavenia. The main content area is divided into two sections:


- EKG Section:** Shows a table of EKG measurements with columns for Date, Time, Patient Name, and various metrics. A modal dialog is open, titled "Preenos dát pamäť všetkých užívateľov v prístroji" (Transfer data memory of all users in the device), with a sub-header "Zo zariadenia boli prenesené nasledujúce údaje: EKG" (From the device, the following data were transferred: EKG). The table in the dialog has columns: "Pamäť uložená v prístroji" (Memory stored in device), "Používateľ" (User), "Celkový počet prenesených meraní" (Total number of transferred measurements), "Duplicitné záznamy" (Duplicate records), "Nové merania" (New measurements), and "Detail". The data row shows: 1 measurement for Juraj Kováč, 3 total measurements, 0 duplicate records, and 3 new measurements. A "Uložiť" (Save) button is at the bottom of the dialog.
- Priemer (Average) Section:** Displays a heart rate icon and the text "Sredná frekvencia 105" (Average frequency 105). The number 105 is circled in red.

At the bottom of the interface, a red warning icon is followed by the text: "Pri zvýšených hodnotách: Navštívte, prosím, svojho lekára za účelom vyšetrenia." (In case of increased values: Please visit your doctor for examination.)

Po prenose vyberte, ktoré hodnoty chcete uložiť:...

Prenos dát pamätí všetkých užívateľov v prístroji

Zo zariadenia boli prenesené nasledujúce údaje: *EKG*

<i>Pamät uložená v prístroji</i>	<i>Používateľ</i>	<i>Celkový počet prenesených meraní</i>	<i>Duplicítne záznamy</i>	<i>Nové merania</i>	<i>Detail</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Juraj Kováč	3	0	3	


Stlačením tlačidla Uložiť sa zvolení používateľa uložia do pamäte.

Uložiť

... či EKG...

Prenos dát pamäti všetkých užívateľov v prístroji X

Zo zariadenia boli prenesené nasledujúce údaje: *EKG*


<i>Pamäť uložená v prístroji</i>	<i>Používateľ</i>	<i>Celkový počet prenesených meraní</i>	<i>Duplicítne záznamy</i>	<i>Nové merania</i>	<i>Detail</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Juraj Kováč	3	0	3	

Stlačením tlačidla Uložiť sa zvolení používateľa uložia do pamäte.


... alebo krvný tlak...

Prenos dát pamätí všetkých užívateľov v prístroji X

Zo zariadenia boli prenesené nasledujúce údaje: *EKG*

<i>Pamät' uložená v prístroji</i>	<i>Používateľ</i>	<i>Celkový počet prenesených meraní</i>	<i>Duplicítne záznamy</i>	<i>Nové merania</i>	<i>Detail</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Juraj Kováč	3	0	3	

Stlačením tlačidla Uložiť sa zvolení používateľa uložia do pamäte.



... prípadne oboje. Potom kliknite na „Uložiť“ a potvrdte uloženie kliknutím na „OK“.

Veroval®

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web application interface. The top navigation bar includes the logo, user information (Juraj Kováč, M1, M2), and the HARTMANN logo. The main menu features options like Prehľad, Krvný tlak, EKG, Hmotnosť, Teplota, Domáci test, Aktivita, and Nastavenia. The EKG section is active, showing a table of measurements for the week of 07.10.2017 to 13.10.2017. A confirmation dialog box is open, displaying the message "Merania boli úspešne uložené." (Measurements were successfully saved.) and an "OK" button. A mouse cursor is pointing at the "OK" button. To the right, a "Priemer" (Average) widget shows a heart icon and the value "105". At the bottom, a red warning icon and text state: "Pri zvýšených hodnotách: Navštívte, prosím, svojho lekára za účelom vyšetrenia." (At increased values: Please visit your doctor for examination.)

Dátum	Čas
12.10.2017	01:58 PM
12.10.2017	02:00 PM
12.10.2017	02:10 PM
12.10.2017	02:16 PM

Priemer
Tepová frekvencia
105

Prí zvýšených hodnotách: Navštívte, prosím, svojho lekára za účelom vyšetrenia.

... prípadne oboje. Potom kliknite na „Uložiť“ a potvrdte uloženie kliknutím na „OK“.

The screenshot displays the Veroval medi.connect user interface. At the top, the user is identified as Juraj Kováč (M1, M2) with the HARTMANN logo. A navigation bar includes options like Prehľad, Krvný tlak, EKG, Hmotnosť, Teplota, Domáci test, Aktivita, and Nastavenia. The EKG section is active, showing a table of measurements for the week of 07.10.2017 to 13.10.2017. The table lists three entries with green status indicators and heart rate values of 84, 83, and 95. A 'Priemer' (Average) summary on the right shows a heart rate of 109. A footer message states: 'Hodnoty v zelenej oblasti: Kontrolujte, prosím, hodnoty naďalej pravidelne sami.'

Týždeň	Mesiac	vybrať	07.10.2017	13.10.2017	Hľadať
Dátum	Čas	Výsledok merania	Tepová frekvencia	Detail	Medikácia/Poznámka
12.10.2017	02:10 PM	OK	84	>	
12.10.2017	02:16 PM	OK	83	>	
13.10.2017	10:06 AM	OK	95	>	

Priemer
Tepová frekvencia
109




Hodnoty v zelenej oblasti: Kontrolujte, prosím, hodnoty naďalej pravidelne sami.


Teraz môžete v hornej časti registra „EKG“ uložené údaje vyhľadať a zobrazit' ako prehľad,...

Veroval®

EKG PDF

Týždeň Mesiac vybrať 07.10.2017 15 - 13.10.2017 15 Hľadať Excel

<input type="checkbox"/>	Dátum	Čas	Výsledok merania	Teplotná frekvencia	Detail	Medikácia/Poznámka
<input type="checkbox"/>	12.10.2017	02:10 PM	● OK	84	>	
<input type="checkbox"/>	12.10.2017	02:16 PM	● OK	83	>	
<input type="checkbox"/>	13.10.2017	10:06 AM	● OK	95	>	



... alebo kliknutím na detailné zobrazenie...

Veroval®



... zobrazíť ako EKG krivku.

Veroval[®]

